

ENGLISH**Indication:**

Polishing discs are indicated for finishing and polishing restorations in composite resin and glass ionomer, and are designed to provide a smooth surface. For this, they should be used starting with the coarsest grain and moving on to the finest. They act as auxiliaries in the finishing and polishing stages, which must be complemented with the use of other polishers.

Intended user:

Duly qualified dental professionals.

Target population:

The product is intended for use in patients who have undergone restorative procedures, with the aim of providing the proper finishing and polishing of the restoration.

Fundamentals of its operation and action:

The polishing discs act by means of controlled abrasion on the surface of the restorative material. The abrasive particles present on the surface of the disc promote the gradual removal of irregularities and grooves formed during the adjustment or finishing of the restoration. The sequential use of different grains, from the coarsest to the finest, allows the progressive reduction of surface roughness, contributing to obtaining a smoother surface with better final gloss.

Applications:

Finishing and polishing of restorations made in composite resin or glass ionomer.

Contraindications:

- The product should not be used in patients with a history of hypersensitivity to any components present in its composition.
- Do not use in restorations made with materials other than composite resin or glass ionomer.
- Do not use the product for purposes other than those for which it was developed.


Instructions for Use:

- The Polidont Polishing Discs come with a metal rod to be fitted and used in the low rotation motor.
- Fit the discs onto the metal rod.
- Fit the mandrel shank to the low-rotation handpiece (counter angle).
- Make sure the metal rod and disc are properly seated in the low-rpm motor.
- Check that the refrigeration is working properly.
- Start the motor and wear/polish the desired region.

The sequence of the procedure for the use of the discs should be in the decreasing direction from higher grain (extra coarse) to the lowest grain size (ultrafine).

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

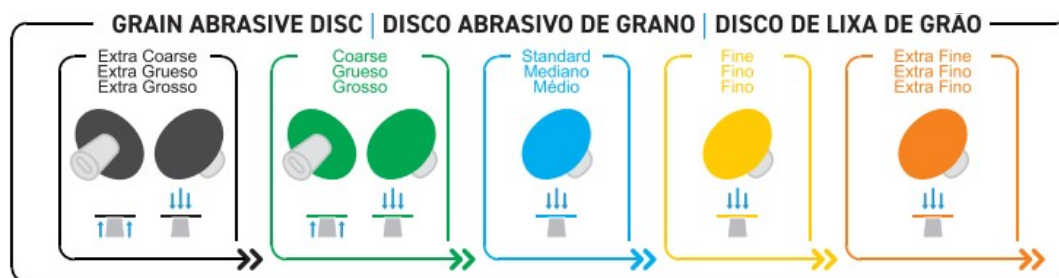

BLACK – EXTRA COARSE GRAIN:

Indicated for the initial finish of the restoration, with the purpose of defining the shape and contour of the tooth and removing excess restorative material.

Due to the greater rigidity of the disc, it is recommended to use it for the definition of buccal and incisal embrasures. Because it has extra coarse grain, it promotes greater abrasion of the restorative surface, which can generate deeper grooves. It is recommended to carry out irrigation or washing of the surface after use, to remove aluminum oxide particles and prevent excessive wear.

The discs can have an active inner or outer face:

- Active outer face: suitable for finishing smooth faces.
- Active inner face: indicated for finishing incisal and/or interproximal faces.

GREEN – COARSE GRAIN: Also indicated to be used in the finishing phase of the restoration. Its surface with coarse abrasive, when applied to the restored surface, promotes the reduction and flattening of the irregularities left by the previous disc.

It can have an active internal or external face, with the same indications for use described above:

- Active outer face: smooth face finish.
- Active inner face: finishing of incisal and/or interproximal faces.

BLUE – MEDIUM GRAIN: Indicated for the final finish of the restoration, being used to reduce or eliminate remaining surface grooves from the previous finishing steps. During this stage, it is recommended to use an intermittent water jet in order to favor the removal of abrasive aluminum oxide particles and avoid heating of the restored surface.

YELLOW – FINE: Suitable for the initial polishing of the restoration. It should be used with a slightly moistened tooth surface. Lubricant can be used during the procedure. The use of continuous waterjet is not necessary due to the small diameter of the abrasive particles.

ORANGE – EXTRA FINE: Indicated for the final polishing of the restoration, promoting greater surface smoothness and final shine of the restorative material.

Form of presentation:

- Non-sterile product.
- Single use.
- Black: Extra Coarse / Green: Coarse / Blue: Medium / Yellow: Fine / Orange: Extra Fine.
- Polidont Introductory Kit: 28 discs + 1 Mandrel
- Polidont Introductory Mini Kit: 7 discs + Mandrel
- Polidont Introductory Mini Kit Refill: 7 discs



Cleaning Procedure:

- The discs are single-use; therefore, they should not be cleaned or reused.
- Only the mandrel can be cleaned and reused.

Sterilization Procedure:

- The discs are supplied non-sterile and should not be sterilized. They should be disposed of after use, according to local regulations for dental waste.
- Only the mandrel can be sterilized and reused

Warnings and Precautions:

- To avoid fractures and distortion of the instrument, do not apply excessive force when inserting the disc into the low-speed handpiece.
- Before use, inspect if the disc is in perfect condition for use, especially in relation to the area with granulation and the integrity of the rod;
- Before use, make sure the disc rod is perfectly fitted to the contra-angle;
- Never force the disc into the counter-angle (low rotation). In case of difficulty in fitting, check the contra-angle (low rotation) and the rod of the Disc.
- It is recommended that the use of the product is always accompanied by absolute isolation of the operative field.
- Do not use the disc as levers and/or at incorrect angles;
- Contact with soft tissues (gums, mucosa) can cause local lesions.
- Cleaning agents with chlorine or chloride as the active ingredient are corrosive to stainless steel and should not be used.
- Prolonged immersion of the Disc in disinfectant solutions may result in corrosion and should therefore be avoided.
- Protective eyewear should be worn to protect against particles ejected on the patient and the professional.
- Wear PPE, including gloves, masks, safety goggles, and long-sleeved lab coats when handling the polishing disc, as is done with all other dental instruments. Wear protective glasses on the patient as well.
- In case of returning the product, make sure that it has been effectively cleaned and properly packaged for return.
- BATCH NUMBER: It is important to keep the batch number, identified in the product title, to be informed of any occurrences with the manufacturer.

Conservation and storage:

- Keep the product in its original packaging until the moment of use. Inspect the packaging before use.
- The product must be stored in an airy, dry place protected from light, in order to maintain ideal storage and transport conditions, as well as its physical and chemical integrity.
- The carrier must be informed of the contents. The precautions to be taken in transport are demonstrated on the packaging, thus ensuring the protection of the instrument from shipping to delivery to the customer. Packets should not be left to the action of time.

Discard:

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

- The disposal of the material must follow the relevant local legislation.

Expiration date:

- Not applicable. The product is manufactured from non-perishable materials and supplied non-sterile. When stored under the conditions indicated, it retains its properties indefinitely.

Shelf life:

- Not applicable. The product is for single use only and should be discarded after use.

Additional information:

- If necessary, 3R provides instructions for use in printed form, at no additional charge, upon request by email (administrativo@3r.ind.br) or by phone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), and we will get back to you no later than 7 business days from the request.
- Always check the website: www.microdont.com.br, the most up-to-date version of the instructions for use corresponding to the product.

Composition:

Active Part - Polyester and Aluminum Oxide

Mandrel – AISI 304 stainless steel

Symbology:

Symbol	Symbol Title	Description
	Validity	Indicates the date after which the health product should not be used.
	Non-sterile	Indicates a health product that has not undergone a sterilization process.
	Do not reuse	Indicates an intended health product for use or for use on a single patient during a single procedure.
	Keep dry	Indicates a health product that needs to be protected against moisture.
	Medical device	Indicates that it is a medical device.
	Recyclable packaging	The packaging is recyclable.
	See instructions for use	Indicates the user's need to refer to the instructions for use.
	Date of manufacture	Indicates the date the health product was manufactured.
	Keep out of sunlight	Indicates a health product that needs protection from light sources.
	Manufacturer	Indicates the manufacturer of the health product.
	Lot Code	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or batch can be identified.
	Catalog Number	Indicates the manufacturer's reference number so that the health product can be identified.
	For professional use only	It indicates that the medical device must be used exclusively by a qualified health professional.
Rx Only	Prescription only	Sale and use restricted to licensed professionals or by prescription, in accordance with applicable legislation.
	Unique Device Identification	Indicates that the adjacent code corresponds to the Unique Device Identifier (UDI).

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

Symbol	Symbol Title	Description
	(UDI)	
	QR Code – Access to the electronic IFU	QR Code to access the electronic version of the product's Instructions for Use (eIFU).

ESPAÑOL

Indicación:

Los discos de pulido están indicados para el acabado y pulido de restauraciones en resina compuesta e ionómero de vidrio, y están diseñados para proporcionar una superficie lisa. Para esto, deben usarse empezando por la veta más gruesa y pasando a la más fina. Actúan como auxiliares en las etapas de acabado y pulido, que deben complementarse con el uso de otros pulidores.

Usuario previsto:

Profesionales dentales debidamente cualificados.

Población objetivo:

El producto está destinado a su uso en pacientes que han sido sometidos a procedimientos restaurativos, con el objetivo de proporcionar el acabado y pulido adecuados de la restauración.

Fundamentos de su funcionamiento y acción:

Los discos de pulido actúan mediante una abrasión controlada en la superficie del material restaurador. Las partículas abrasivas presentes en la superficie del disco favorecen la eliminación gradual de irregularidades y surcos formados durante el ajuste o acabado de la restauración. El uso secuencial de diferentes granos, desde los más gruesos hasta los más finos, permite la reducción progresiva de la rugosidad superficial, contribuyendo a obtener una superficie más lisa con mejor brillo final.

Aplicaciones:

Acabado y pulido de restauraciones realizadas en resina compuesta o en ionómero de vidrio.

Contraindicaciones:

- El producto no debe usarse en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a ningún componente presente en su composición.
- No se utilice en restauraciones realizadas con materiales distintos a resina compuesta o ionómero de vidrio.
- No utilizar el producto para fines distintos a aquellos para los que fue desarrollado.


Instrucciones de uso:

- Los discos de pulido Polidont vienen con una varilla metálica que se puede instalar y usar en el motor de baja rotación.
- Coloca los discos en la varilla metálica.
- Ajustar el vástago metálico del mandril a la pieza de mano de baja rotación (ángulo contrario).
- Asegúrate de que la varilla y el disco metálicos estén correctamente asentados en el motor de bajas revoluciones.
- Comprueba que la refrigeración funcione correctamente.
- Arrancar el motor y desgastar/pulir la región deseada.

La secuencia del procedimiento para el uso de los discos debe ir en dirección decreciente desde grano más alto (extra grueso) hasta el tamaño de grano más bajo (ultrafino).

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

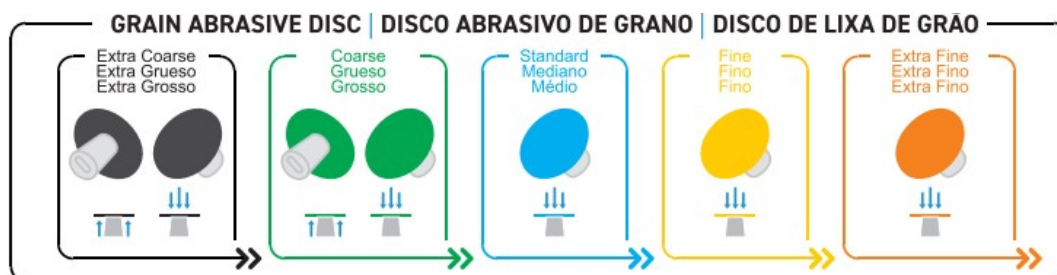

NEGRO – GRANO EXTRA GRUESO:

Indicado para el acabado inicial de la restauración, con el propósito de definir la forma y el contorno del diente y eliminar el exceso de material restaurador.

Debido a la mayor rigidez del disco, se recomienda utilizarlo para definir las troneras vestibulares e incisales. Debido a que tiene una veta extra gruesa, favorece una mayor abrasión de la superficie restauradora, lo que puede generar ranuras más profundas. Se recomienda realizar riego o lavado de la superficie tras su uso, para eliminar partículas de óxido de aluminio y evitar un desgaste excesivo.

Los discos pueden tener una cara interna o externa activa:

- Cara externa activa: indicada para finalizar caras lisas.
- Cara interna activa: indicada para caras incisales y/o interproximales finales.

VERDE – GRANO GRUESO: También indicado para usarse en la fase de acabado de la restauración. Su superficie con abrasivo grueso, cuando se aplica sobre la superficie restaurada, favorece la reducción y aplanamiento de las irregularidades dejadas por el disco anterior.

Puede tener una cara interna o externa activa, con las mismas indicaciones de uso descritas anteriormente:

- Cara exterior activa: acabado liso de la cara.
- Cara interna activa: acabado de las caras incisales y/o interproximales.

AZUL – GRANO MEDIO: Indicado para el acabado final de la restauración, utilizado para reducir o eliminar las ranuras superficiales restantes de los pasos de acabado anteriores. Durante esta etapa, se recomienda utilizar un chorro de agua intermitente para favorecer la eliminación de partículas abrasivas de óxido de aluminio y evitar el calentamiento de la superficie restaurada.

AMARILLO – FINO: Adecuado para el pulido inicial de la restauración. Debe usarse con una superficie dental ligeramente humedecida. Se puede usar lubricante durante el procedimiento. No es necesario usar chorro de agua continuo debido al pequeño diámetro de las partículas abrasivas.

NARANJA – EXTRA FINO: Indicado para el pulido final de la restauración, promoviendo una mayor suavidad superficial y un brillo final del material restaurador.

Forma de presentación:

- Producto no estéril.
- Uso único.
- Negro: Extra Grueso / Verde: Grueso / Azul: Medio / Amarillo: Fino / Naranja: Extra Fino.
- Kit Polidont Introductorio: 28 discos + 1 Mandril
- Mini Kit Polidont Introductorio: 7 discos + Mandril
- Recarga del Mini Kit Polidont Introductorio: 7 discos



Procedimiento de limpieza:

- Los discos son de un solo uso; por lo tanto, no deben limpiarse ni reutilizarse.
- Solo el mandril puede limpiarse y reutilizarse.

Procedimiento de esterilización:

- Los discos se suministran no estériles y no deben ser esterilizados. Según la normativa local sobre residuos dentales, deben desecharse después de su uso.
- Solo el mandril puede ser esterilizado y reutilizado

Advertencias y precauciones:

- Para evitar fracturas y deformaciones del instrumento, no aplicar una fuerza excesiva al insertar el disco en la pieza de mano de baja velocidad.
- Antes de su uso, inspeccionar si el disco está en condiciones perfectas para su uso, especialmente en relación con la zona granulada y la integridad de la varilla;
- Antes de usar, asegurarse de que la varilla del disco esté perfectamente ajustada al contraángulo;
- Nunca forces el disco hacia el ángulo contrario (baja rotación). En caso de dificultad para ajustar, comprueba el contraángulo (baja rotación) y la varilla del disco.
- Se recomienda que el uso del producto vaya siempre acompañado de un aislamiento absoluto del campo operatorio.
- No usar el disco como palancas y/o en ángulos incorrectos;
- El contacto con tejidos blandos (encías, mucosa) puede causar lesiones locales.
- Los agentes de limpieza con cloro o cloruro como principio activo son corrosivos para el acero inoxidable y no deben utilizarse.
- La inmersión prolongada del disco en soluciones desinfectantes puede provocar corrosión y, por tanto, debe evitarse.
- Se deben llevar gafas protectoras para evitar la expulsión de partículas sobre el paciente y el profesional.
- Llevar EPI, incluidos guantes, mascarillas, gafas de seguridad y batas de manga larga al manipular el disco de pulido, como ocurre con todos los demás instrumentos dentales. Lleva también gafas protectoras en el paciente.
- En caso de devolver el producto, asegúrate de que haya sido correctamente limpiado y envasado correctamente para la devolución.
- NÚMERO DE LOTE: Es importante mantener el número de lote, identificado en el título del producto, para estar informado de cualquier ocurrencia con el fabricante.

Conservación y almacenamiento:

- Conservar el producto en su embalaje original hasta el momento de su uso. Inspecciona el embalaje antes de usarlo.
- El producto debe almacenarse en un lugar aireado y seco, protegido de la luz, para mantener condiciones ideales de almacenamiento y transporte, así como su integridad física y química.
- El transportista debe ser informado del contenido. Las precauciones a tomar en el transporte se muestran en el embalaje, asegurando así la protección del instrumento desde el envío hasta la entrega al cliente. Los paquetes no deben dejarse a la acción del tiempo.

Descarte:

- La eliminación del material debe cumplir con la legislación local pertinente.

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

Plazo de validez:

- No aplicable. El producto está fabricado con materiales no perecederos y se suministra de forma no estéril. Cuando se almacena bajo las condiciones indicadas, conserva sus propiedades indefinidamente.

Vida útil:

- No aplicable. El producto es solo para un solo uso y debe desecharse después de su uso.

Información adicional:

- Si es necesario, 3R proporciona instrucciones para su uso en formato impreso, sin coste adicional, a solicitud por correo electrónico (administrativo@3r.ind.br) o por teléfono: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), y le responderemos a más tardar 7 días laborables desde la solicitud.
- Consulta siempre la web: www.microdont.com.br, la versión más actualizada de las instrucciones de uso correspondientes al producto.

Composición:

Parte activa - Poliéster y óxido de aluminio

Mandril – acero inoxidable AISI 304

Simbología:

Símbolo	Título del símbolo	Descripción
	Validez	Indica la fecha después de la cual no se debe utilizar el producto para la salud.
	No estéril	Indica un producto sanitario que no ha sido sometido a un proceso de esterilización.
	No reutilizar	Indica un producto de salud previsto para su uso o para su uso en un solo paciente durante un solo procedimiento.
	Mantener seco	Indica un producto para la salud que necesita ser protegido contra la humedad.
	Dispositivo médico	Indica que es un dispositivo médico.
	Envases reciclables	El embalaje es reciclable.
	Ver instrucciones de uso	Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso.
	Fecha de fabricación	Indica la fecha en que se fabricó el producto sanitario.
	Mantener alejado de la luz solar	Indica un producto para la salud que necesita protección contra fuentes de luz.
	Fabricante	Indica el fabricante del producto sanitario.
	Código del lote	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote.
	Número de catálogo	Indica el número de referencia del fabricante para que se pueda identificar el producto para la salud.
	Solo para uso profesional	Indica que el dispositivo médico debe ser utilizado exclusivamente por un profesional de la salud calificado.
Rx Only	Venta bajo prescripción	Venta y uso restringidos a profesionales habilitados o mediante prescripción, conforme a la legislación aplicable.
	Identificación Única del	Indica que el código adyacente corresponde al Identificador Único del Dispositivo (UDI).

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

Símbolo	Título del símbolo	Descripción
	Dispositivo (UDI)	
	Código QR - Acceso a la IFU electrónica	Código QR para acceder a la versión electrónica de las Instrucciones de Uso (eIFU) del producto.

PORTUGUÊS

Indicação:

Os discos de polimento são indicados para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, sendo projetados para proporcionar uma superfície lisa. Para isso, devem ser usados começando pela granulação mais grossa e seguindo para a mais fina. Eles atuam como auxiliares nas etapas de acabamento e polimento, que devem ser complementadas com o uso de outros polidores.

Usuário pretendido:

Profissionais da área odontológica devidamente habilitados.

População-alvo:

O produto é destinado ao uso em pacientes que foram submetidos a procedimentos restauradores, com o objetivo de proporcionar o acabamento e o polimento adequados da restauração.

Fundamentos de seu funcionamento e ação:

Os discos de polimento atuam por meio de abrasão controlada sobre a superfície do material restaurador. As partículas abrasivas presentes na superfície do disco promovem a remoção gradual de irregularidades e ranhuras formadas durante o ajuste ou acabamento da restauração. A utilização sequencial de diferentes granulações, da mais grossa para a mais fina, permite a redução progressiva da rugosidade superficial, contribuindo para a obtenção de uma superfície mais lisa e com melhor brilho final.

Aplicações:

Acabamento e polimento de restaurações realizadas em resina composta ou ionômero de vidro.

Contraindicações:

- O produto não deve ser utilizado em pacientes com histórico de hipersensibilidade a quaisquer componentes presentes em sua composição.
- Não utilizar em restaurações confeccionadas com materiais diferentes da resina composta ou ionômero de vidro.
- Não utilizar o produto para finalidades distintas daquelas para as quais foi desenvolvido.


Instruções de Utilização:

- Os Discos de Polimento Polidont acompanham uma haste metálica para serem encaixados e usados no motor de baixa rotação.
- Encaixe os discos na haste metálica.
- Encaixe a haste metálica do mandril na peça de mão de baixa rotação (contra ângulo).
- Certifique-se de que a haste metálica e o disco estejam devidamente encaixados no motor de baixa rotação.
- Verifique se a refrigeração esteja funcionando adequadamente.
- Acione o motor e realize o desgaste/polimento da região desejada.

A sequência do procedimento do uso dos discos deve ser no sentido decrescente de maior granulação (extra grosso) para a menor granulação (ultrafino).

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

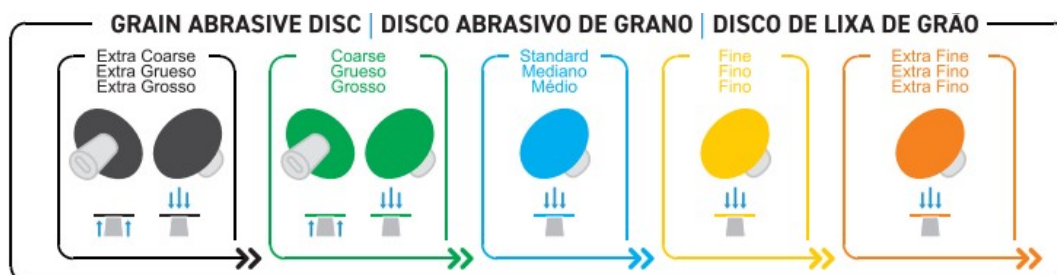

PRETO – GRANULAÇÃO EXTRA GROSSA:

Indicado para o acabamento inicial da restauração, com a finalidade de definir forma e contorno do dente e remover excessos de material restaurador.

Devido à maior rigidez do disco, recomenda-se seu uso para definição de ameias vestibulares e incisais. Por apresentar granulação extra grossa, promove maior abrasão da superfície restauradora, podendo gerar ranhuras mais profundas. Recomenda-se realizar irrigação ou lavagem da superfície após o uso, para remoção das partículas de óxido de alumínio e prevenção de desgaste excessivo.

Os discos podem apresentar face interna ou externa ativa:

- Face externa ativa: indicada para acabamento de faces lisas.
- Face interna ativa: indicada para acabamento de faces incisais e/ou interproximais.

VERDE – GRANULAÇÃO GROSSA: Indicado também para ser utilizado na fase de acabamento da restauração. Sua superfície com abrasivo grosso, quando aplicada sobre a superfície restaurada, promove a redução e o aplainamento das irregularidades deixadas pelo disco anterior.

Pode apresentar face interna ou externa ativa, com as mesmas indicações de uso descritas anteriormente:

- Face externa ativa: acabamento de faces lisas.
- Face interna ativa: acabamento de faces incisais e/ou interproximais.

AZUL – GRANULAÇÃO MÉDIA: Indicado para o acabamento final da restauração, sendo utilizado para reduzir ou eliminar ranhuras superficiais remanescentes das etapas anteriores de acabamento. Durante esta etapa, recomenda-se o uso de jato de água intermitente, a fim de favorecer a remoção das partículas abrasivas de óxido de alumínio e evitar aquecimento da superfície restaurada.

AMARELO – FINO: Indicado para o polimento inicial da restauração. Deve ser utilizado com a superfície dental levemente umedecida. Pode-se utilizar lubrificante durante o procedimento. O uso de jato de água contínuo não é necessário devido ao reduzido diâmetro das partículas abrasivas.

LARANJA – EXTRA FINO: Indicado para o polimento final da restauração, promovendo maior lisura superficial e brilho final do material restaurador.

Forma de apresentação:

- Produto não estéril.
- Uso único.
- Preto: Extra Grosso / Verde: Grosso / Azul: Médio / Amarelo: Fino / Laranja: Extra-fino.
- Kit Polidont Introdutório: 28 discos + 1 Mandril
- Mini kit Polidont Introdutório: 7 discos + Mandril
- Refil mini kit Polidont Introdutório: 7 discos



Procedimento de limpeza:

- Os discos são de uso único; portanto, não devem ser limpos nem reutilizados.
- Apenas o mandril pode ser limpo e reutilizado.

Procedimento de esterilização:

- Os discos são fornecidos não estéreis e não devem ser esterilizados. Devem ser descartados após o uso, conforme regulamentação local para resíduos odontológicos.
- Apenas o mandril pode ser esterilizado e reutilizado.

Avisos e Precauções:

- Para evitar fraturas e distorção do instrumento, não aplique força excessiva no momento de inserir o disco na peça de mão de baixa rotação.
- Antes do uso, inspecionar se o disco se encontra em perfeitas condições de uso, principalmente em relação à área com granulação e a integridade da haste;
- Antes de usar, certifique-se de que a haste do disco esteja perfeitamente encaixada no contra ângulo;
- Nunca forçar o encaixe do disco no contra-ângulo (baixa rotação). Em caso de dificuldade no encaixe, verificar o contra-ângulo (baixa rotação) e a haste do Disco.
- Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório.
- Não utilizar o disco como alavanca e/ou em angulações incorretas;
- O contato com tecidos moles (gengiva, mucosa) pode provocar lesões locais.
- Os agentes de limpeza com cloro ou cloreto como ingrediente ativo são corrosivos para o aço inoxidável e não devem ser utilizados.
- A imersão prolongada do Disco em soluções desinfetantes pode resultar em corrosão e, portanto, deve ser evitada.
- Óculos de proteção devem ser usados para proteger contra partículas ejetadas no paciente e no profissional.
- Use EPI, incluindo luvas, máscaras, óculos de segurança e jalecos de mangas compridas ao manusear o disco de polimento, como é feito com todos os outros instrumentos odontológicos. Use óculos de proteção no paciente também.
- Em caso de devolução do produto, certifique-se de que ele foi efetivamente limpo e devidamente embalado para devolução.
- NÚMERO DO LOTE: É importante guardar o número do lote, identificado no título do produto, para ser informado de eventuais ocorrências com o fabricante.

Conservação e armazenamento:

- Mantenha o produto em sua embalagem original até o momento do uso. Inspeção a embalagem antes de usar.
- O produto deve ser armazenado em local arejado, seco e protegido da luz, de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, bem como sua integridade física e química.
- A transportadora deve ser informada do conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte são demonstrados na embalagem, garantindo assim a proteção do instrumento desde o envio até a entrega ao cliente. Os pacotes não devem ser deixados à ação do tempo.

Descarte:

- O descarte do material deverá seguir a legislação local pertinente.

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

Prazo de validade:

- Não aplicável. O produto é fabricado com materiais não perecíveis e fornecido não estéril. Quando armazenado conforme as condições indicadas, mantém suas propriedades indefinidamente.

Vida útil:

- Não aplicável. O produto é de uso único e deve ser descartado após o uso.

Informações adicionais:

- Se necessário, a 3R fornece as instruções de uso em formato impresso, sem custo adicional, mediante solicitação por e-mail (administrativo@3r.ind.br) ou por telefone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), e retornaremos no prazo máximo de 7 dias úteis a partir da solicitação.
- Verifique sempre no site: www.microdont.com.br, a versão mais atualizada das instruções de uso correspondentes ao produto.

Composição:

Parte ativa - Poliéster e Óxido de Alumínio

Mandril - Aço inoxidável AISI 304

Simbologia:

Símbolo	Título do Símbolo	Descrição
	Validade	Indica a data após a qual o produto de saúde não deve ser utilizado.
	Não estéril	Indica um produto para a saúde que não foi submetido a processo de esterilização.
	Não reutilizar	Indica um produto para a saúde pretendido para uma utilização ou para utilização em um único paciente durante um único procedimento.
	Manter seco	Indica um produto para saúde que necessita ser protegido contra umidade.
	Dispositivo médico	Indica que é um dispositivo médico.
	Embalagem reciclável	A embalagem é reciclável.
	Consulte as instruções para utilização	Indica a necessidade do usuário de consultar as instruções para utilização.
	Data de fabricação	Indica a data em que o produto de saúde foi fabricado.
	Mantenha longe da luz solar	Indica um produto para saúde que necessita de proteção contra fontes de luz.
	Fabricante	Indica o fabricante do produto para saúde.
	Código do lote	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou partida possam ser identificados.
	Número de catálogo	Indica o número de referência do fabricante para que o produto para a saúde possa ser identificado.
	Apenas para uso profissional	Indica que o dispositivo médico deve ser utilizado exclusivamente por um profissional qualificado da área da saúde.
Rx Only	Venda sob prescrição	Venda e uso restritos a profissionais habilitados ou mediante prescrição, conforme a legislação aplicável.
	Identificação Única do	Indica que o código adjacente corresponde ao Identificador Único do Dispositivo (UDI).

POLIDONT
POLIDONT
POLIDONT

REV.

Símbolo	Título do Símbolo	Descrição
	Dispositivo (UDI)	
	QR Code – Acesso à IFU eletrônica	QR Code para acessar a versão eletrônica das Instruções de Uso (eIFU) do produto.

Histórico de Revisão / Revision History / Historial de Revisiones

Rev	Description	Date
00	Emissão inicial/ Initial Emission	03/2026
01	Padronização do modelo da Instrução de Uso (IFU), com atualização das simbologias, informações de contato e demais informações gerais do documento. / Standardization of the Instructions for Use (IFU) template, with updated symbols, contact information and other general document information.	31/07/2026